



## Histofix® Conservante pronto all'uso per clinica diagnostica

Soluzione di formaldeide al 3,7 - 4,0%, utilizzata come fissativo/conservante in anatomia patologica.


Disponibile in contenitori di polipropilene di vari formati, con formaldeide predosata per un rapido e comodo utilizzo evitando qualsiasi operazione preliminare di diluizione.

Soluzione neutra tamponata a pH 7 con fosfato di sodio e stabilizzata con metanolo al fine di evitare possibili fenomeni di ossidazione aumentando così l'efficacia di conservazione del campione.

L'esclusivo design dei contenitori garantisce la perfetta ermeticità degli stessi e quindi un'elevata stabilità del campione. Inoltre la zigrinatura della base assicura un'ottima presa nell'utilizzo con i guanti evitando che il contenitore scivoli accidentalmente.

Disponibile anche nel colore rosa per una migliore visualizzazione dei campioni piccoli

Conforme ai requisiti del marchio CE previsto per prodotti sanitari destinati a diagnosi in vitro.

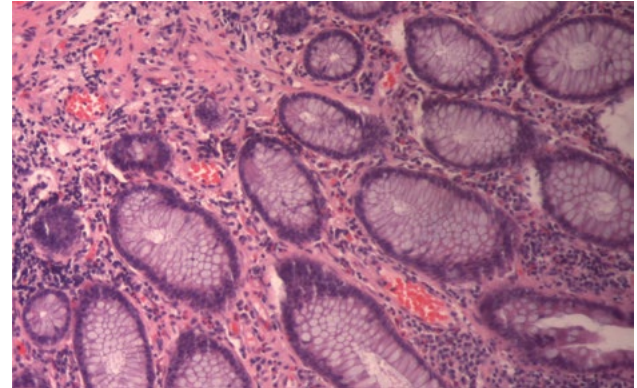

### Vantaggi principali

- **Praticità:** Flacone trasparente contenente Histofix® Conservante pronto all'uso. Sull'etichetta sono riportate tutte le informazioni relative al prodotto.
- **Sicurezza:** Non essendo necessaria alcuna manipolazione, si eliminano i problemi associati alla tossicità della soluzione. La perfetta ermeticità dei contenitori riduce al minimo qualsiasi rischio di sversamento del prodotto.
- **Qualità:** L'elevata qualità e stabilità della nostra formaldeide consentono di ottenere un fissaggio efficace e riproducibile.
- **Varietà di formati:** Disponibile in un'ampia gamma di formati per favorire l'operatore nella scelta della giusta quantità da utilizzare.


1 Fissaggio




2 Disidratazione/  
Chiarificazione



3 Inclusione nella paraffina

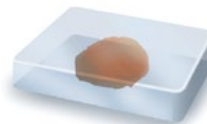

7 Montaggio

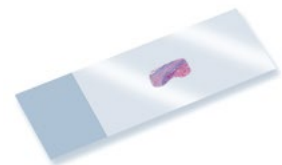

4 Taglio



5 Rimozione della paraffina/  
Idratazione




6 Colorazione





Seconda chiusura

Prima chiusura

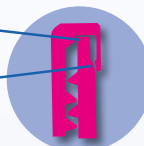

Doppia chiusura di sicurezza

Il tappo è provvisto di una doppia chiusura di sicurezza per garantire la completa ermeticità del contenitore



Il tappo a vite dei flaconi è zigrinato per facilitarne l'apertura e la chiusura



La parte superiore del flacone è progettata per facilitare il versamento evitando però il gocciolamento lungo i bordi



I contenitori sono provvisti di una scala graduata in rilievo ogni 10 mL

Codice del prodotto	Quantità formaldeide (mL) *	Unità / confezione	Informazioni relative al flacone				Foto del flacone
			Volume graduato (mL)	Volume totale (mL)	Ø apertura (mm)	Altezza con tappo (mm)	
256462.0905 257462.0905 (rosa)	10	45	20	25	34	43	
256462.0955	20	44	40	50	45	43	
256462.0962 257462.0962 (rosa)	30	45	60	76	45	60	
256462.0961 257462.0961 (rosa)	40	45	60	76	45	60	
256462.0967	75	24	120	146	53	78	
256462.0943	125	16	150	250	89	57	
256462.0944	200	12	350	500	90	110	
256462.09149	600	10	—	1200	125	126	
256462.09118	1500	4	—	3100	190	138	
256462.09150	3000	4	—	5300	210	183	

IP-011IT

